

Sina HYPE 12 G3

CON PILA 10



 **Audio Service**

CARACTERÍSTICAS

Audífono de oído CIC semimodular

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Compartimento de la pila como conexión y desconexión

Pulsador (integrado en la tapa del compartimento para pilas), programable como pulsador para selección de programas, como pulsador para selección de programas con función de conexión y desconexión

Señales acústicas/melodías dependientes del nivel (puede activarse o desactivarse) para tensión baja de pila, función de conexión/desconexión

Retardo de conexión Audiomatic (P) (puede activarse o desactivarse)

Filtro de auricular HF 3 Black o HF 4 Black

Hilo de extracción para extraer el audífono del oído

Filtro de micrófono Microsafe

OPCIONES

Aplicación Smart Remote

CABLE DE PROGRAMACIÓN

Cable de programación, derecha Núm. de art. 105 40 984

Cable de programación, izquierda Núm. de art. 105 40 985

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

32 canales de procesamiento de la señal /

16 canales de frecuencia

16 canales AGC / 16 canales MPO

6 programas de audición

Data Logging

PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL

Sistema Anti-Feedback G3

Control del ruido de fondo

› Reducción adaptable del ruido de fondo

› Filtro Wiener

› Supresor de impulsos

› Sistema automático de situación

Concepto de frecuencia y dinámica

› TRC S

› Compresión selectiva de la frecuencia


› Funcionalidad HiFi

FUNCIONES AUTOMÁTICAS

Acclimatic inteligente

Comformatic

RANGO DE ADAPTACIÓN

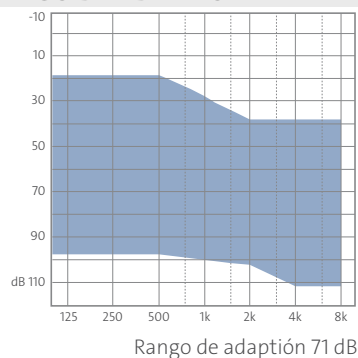

P = Patente

Más información en www.audioservice.com

Sina HYPE 12 G3

Ganancia 71 dB



Audio Service



SALIDA MÁXIMA

Entrada: 90 dB SPL



GANANCIA MÁXIMA

Entrada: 50 dB SPL

IEC 60118-7:2005¹⁾
ANSI S3.22-2009¹⁾

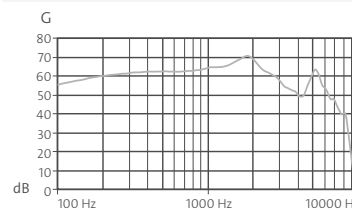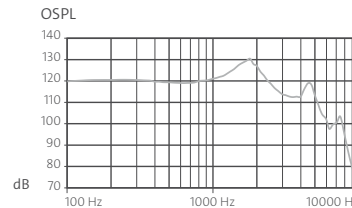

IEC 60118-0²⁾

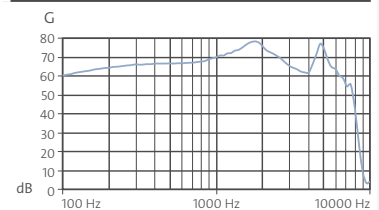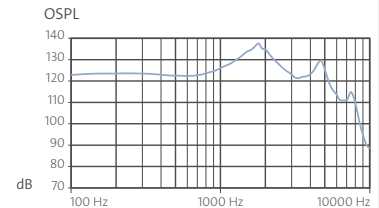

INFORMACIÓN TÉCNICA

SALIDA MÁXIMA

Valor pico a 90 dB	131 dB	138 dB
1.600 Hz (RTF)	129 dB	135 dB
Promedio en frecuencias altas	123 dB	128 dB

GANANCIA MÁXIMA

Valor pico a 50 dB	71 dB	79 dB
1.600 Hz (RTF)	70 dB	77 dB
Promedio en frecuencias altas	66 dB	71 dB
Ganancia de comprobación de referencia	46 dB	70 dB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamaño de pila	10	10
Vida útil de pila en horas	63	63
Rango de frecuencia	100 – 6.000 Hz	100 – 5.500 Hz
Consumo de corriente de la pila	1,00 mA	1,00 mA
Nivel de ruido equivalente	17 dB	20 dB
Distorsión		
500 Hz	1%	2%
800 Hz	1%	1%
1.600 Hz	1%	1%

¹⁾ Datos técnicos medidos de acuerdo a IEC 60118-7:2005 y ANSI S3.22-2009 en acoplador de 2 cc

²⁾ Datos técnicos medidos de acuerdo a IEC 60118-0 en acoplador de simulador de oído



ADVERTENCIA

Riesgo de asfixia por piezas pequeñas.
Este dispositivo no es apto para su uso por lactantes, niños pequeños ni personas con discapacidad psíquica.



ADVERTENCIA

El nivel máximo de presión sonora de salida que pueden alcanzar los audífonos es de 132 dB SPL o mayor.
Riesgo de lesiones auditivas del usuario. Preste atención a un ajuste cuidadoso de los audífonos.

Para verificar rango de controles y otras características de programación véase Simulación de Instrumentos Auditivos en Connex 7.5 y AudioFit 7.5 o versiones posteriores.