

Sun 8 G4

AUDÍFONO RIC CON PILAS 13



CARACTERÍSTICAS

Audífono RIC con auriculares externos
Para el ajuste abierto y cerrado

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Dual Energy Technology: Se puede utilizar o bien con batería o pilas

Compartimento de la pila como conexión y desconexión

Interruptor basculante, programable como pulsador para selección de programas, para conexión/desconexión, como control de volumen o como control de sonido, subir/bajar nivel de ruido de acúfenos

Señales acústicas/melodías dependientes del nivel (puede activarse o desactivarse), para tensión baja de pila, cambio de programa, control de volumen, función de conexión/desconexión

Bobina telefónica

Concepto Personal-Color

Retardo de conexión Audiomatic (P) (puede activarse o desactivarse)

Certificación IP67

OPCIONES



Cargador Smart Power

Streamer de audio Smart Connect

Control remoto Smart Remote

Control remoto Smart Key

Aplicación Smart Connect

Aplicación Smart Remote

Set de auriculares externos S con G_{máx.} de 45 dB¹⁾

Set de auriculares externos M con G_{máx.} de 60 dB¹⁾

Set de auriculares externos P con G_{máx.} de 70 dB²⁾

Molde individual CLIC MOULD 2.0 (Open o Power)

Molde estándar Click Dome (Open, Semi-open, Closed o Double)

Click Sleeves (Open o Closed)

AutoPhone Set

ADAPTADOR DE PROGRAMACIÓN

Adaptador 13

Núm. de art. 108 24 470

COLORES DE LA CARCASA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

24 canales de procesamiento de la señal / 12 canales de frecuencia

12 canales AGC / 12 canales MPO

6 programas auditivos

> MusicSelect

> ZearPhone

Data Logging

Wireless

> AudioLink

> Sincronización binaural

> Wireless audio streaming opcional

> CROS/BiCROS

PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL

Sistema Anti-Feedback

Control del ruido de fondo

> Reducción adaptativa del ruido de fondo

> Filtro Wiener

> Reducción adaptativa del ruido del viento

> Supresor de impulsos

> Sistema automático de situación

Sistema multimicrófono AudioTronic

> Panorama

> Direccionalidad estática

> Automático

> Adaptativo

> AudioSpot

Concepto de frecuencia y dinámica

> TRC S

> Compresión selectiva de la frecuencia

Programable función tinnitus


FUNCIONES AUTOMÁTICAS

Comfort365


Acclimatic

Comformatic


RANGOS DE ADAPTACIÓN

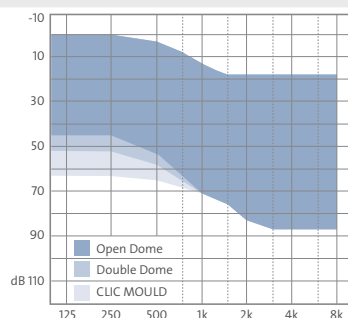

Rango de adaptación auriculare externo 45 dB

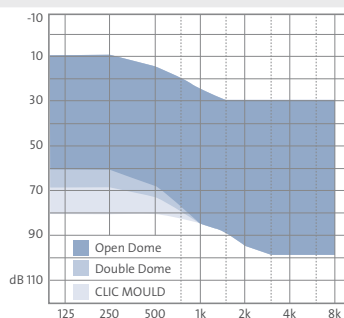

Rango de adaptación auriculare externo 60 dB

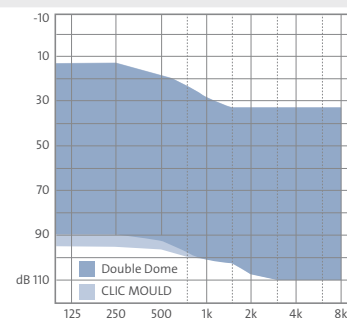

Rango de adaptación auriculare externo 70 dB²⁾

¹⁾ medidos de acuerdo a IEC 60118-7:2005 y ANSI S3.22-2009

²⁾ 70 dB medido con CLIC MOULD 2.0; en caso de ajuste con obstructores, variarán los valores.

P = Patente

Sun 8 G4

Ganancia 45 dB



 **Audio Service**



SALIDA MÁXIMA

Entrada: 90 dB SPL



GANANCIA MÁXIMA

Entrada: 50 dB SPL

IEC 60118-7:2005³⁾
ANSI S3.22-2009³⁾

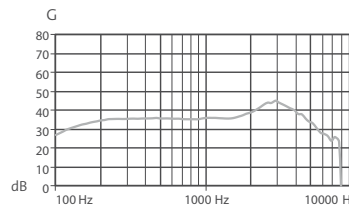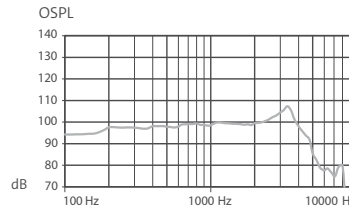

IEC 60118-0⁴⁾

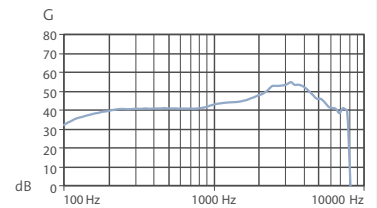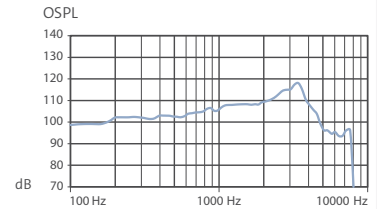

INFORMACIÓN TÉCNICA

SALIDA MÁXIMA

Valor pico a 90 dB	108 dB	119 dB
1.600 Hz	99 dB	108 dB
Promedio en frecuencias altas	100 dB	106 dB

GANANCIA MÁXIMA

Valor pico a 50 dB	45 dB	56 dB
1.600 Hz	36 dB	45 dB
Promedio en frecuencias altas	38 dB	44 dB
Ganancia de comprobación de referencia	23 dB	28 dB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamaño de pila	13	13
Vida útil de pila en horas	226	226
Rango de frecuencias	100 – 8.500 Hz	100 – 8.300 Hz
Consumo de corriente de la pila	0,90 mA	0,90 mA
Nivel de ruido equivalente	18 dB	19 dB
Enmascarador de tinitus de banda ancha	65 dB	
Sensibilidad de la bobina auditiva (1 mA/m)	66 dB	73 dB
Distorsión		
500 Hz	1%	1%
800 Hz	1%	1%
1.600 Hz	1%	2%

³⁾ Datos técnicos medidos de acuerdo a IEC 60118-7:2005 y ANSI S3.22-2009 en acoplador de 2 cc

⁴⁾ Datos técnicos medidos de acuerdo a IEC 60118-0 en acoplador de simulador de oído



ADVERTENCIA

Riesgo de asfixia por piezas pequeñas.

Este dispositivo no es apto para su uso por lactantes, niños pequeños ni personas con discapacidad psíquica.

Sun 8 G4

Ganancia 60 dB



Audio Service



SALIDA MÁXIMA

Entrada: 90 dB SPL



GANANCIA MÁXIMA

Entrada: 50 dB SPL

IEC 60118-7:2005³⁾
ANSI S3.22-2009³⁾

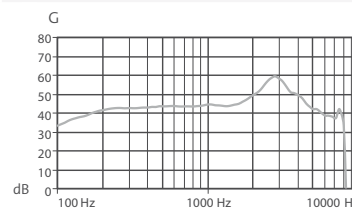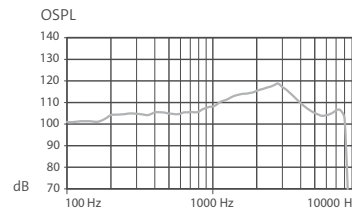

IEC 60118-0⁴⁾

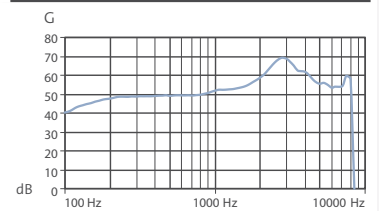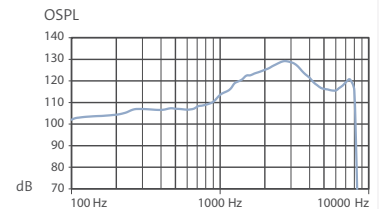

INFORMACIÓN TÉCNICA

SALIDA MÁXIMA

Valor pico a 90 dB	119 dB	129 dB
1.600 Hz	114 dB	122 dB
Promedio en frecuencias altas	113 dB	116 dB

GANANCIA MÁXIMA

Valor pico a 50 dB	60 dB	70 dB
1.600 Hz	45 dB	54 dB
Promedio en frecuencias altas	49 dB	53 dB
Ganancia de comprobación de referencia	37 dB	47 dB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamaño de pila	13	13
Vida útil de pila en horas	185	185
Rango de frecuencias	100 – 8.200 Hz	100 – 8.300 Hz
Consumo de corriente de la pila	1,1 mA	1,1 mA
Nivel de ruido equivalente	19 dB	23 dB
Enmascarador de tinitus de banda ancha	70 dB	
Sensibilidad de la bobina auditiva (1 mA/m)	78 dB	84 dB
Distorsión		
500 Hz	1%	1%
800 Hz	1%	2%
1.600 Hz	2%	1%

³⁾ Datos técnicos medidos de acuerdo a IEC 60118-7:2005 y ANSI S3.22-2009 en acoplador de 2 cc

⁴⁾ Datos técnicos medidos de acuerdo a IEC 60118-0 en acoplador de simulador de oído



ADVERTENCIA

Riesgo de asfixia por piezas pequeñas.

Este dispositivo no es apto para su uso por lactantes, niños pequeños ni personas con discapacidad psíquica.

Sun 8 G4

Ganancia 70 dB²⁾



Audio Service



SALIDA MÁXIMA

Entrada: 90 dB SPL



GANANCIA MÁXIMA

Entrada: 50 dB SPL

IEC 60118-7:2005³⁾
ANSI S3.22-2009³⁾

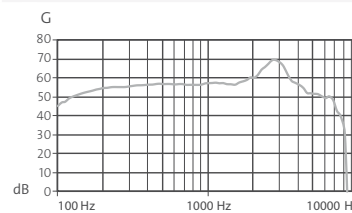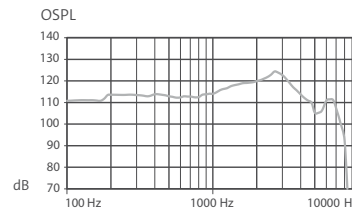

IEC 60118-0⁴⁾

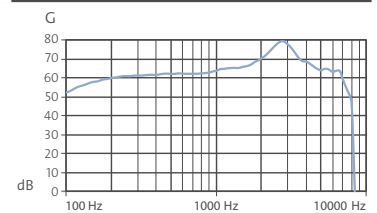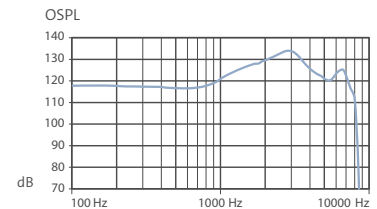

INFORMACIÓN TÉCNICA

SALIDA MÁXIMA

Valor pico a 90 dB	124 dB	134 dB
1.600 Hz	118 dB	127 dB
Promedio en frecuencias altas	118 dB	122 dB

GANANCIA MÁXIMA

Valor pico a 50 dB	70 dB	80 dB
1.600 Hz	59 dB	67 dB
Promedio en frecuencias altas	62 dB	66 dB
Ganancia de comprobación de referencia	41 dB	52 dB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamaño de pila	13	13
Vida útil de pila en horas	203	203
Rango de frecuencias	100 – 7500 Hz	100 – 8.100 Hz
Consumo de corriente de la pila	1,00 mA	1,00 mA
Nivel de ruido equivalente	18 dB	20 dB
Enmascarador de tinitus de banda ancha	75 dB	
Sensibilidad de la bobina auditiva (1 mA/m)	83 dB	89 dB
Distorsión		
500 Hz	1%	3%
800 Hz	2%	3%
1.600 Hz	1%	2%

²⁾ 70 dB medido con CLIC MOULD 2.0; en caso de ajuste con obstructores, variarán los valores.

³⁾ Datos técnicos medidos de acuerdo a IEC 60118-7:2005 y ANSI S3.22-2009 en acoplador de 2 cc

⁴⁾ Datos técnicos medidos de acuerdo a IEC 60118-0 en acoplador de simulador de oído

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de asfixia por piezas pequeñas.
Este dispositivo no es apto para su uso por lactantes, niños pequeños ni personas con discapacidad psíquica.

⚠ ADVERTENCIA El nivel máximo de presión sonora de salida que pueden alcanzar los audífonos es de 132 dB SPL o mayor.
Riesgo de lesiones auditivas del usuario. Preste atención a un ajuste cuidadoso de los audífonos.

Para verificar rango de controles y otras características de programación véase Simulación de Instrumentos Auditivos en Connex 8.3 y AudioFit 8.3 o versiones posteriores.

AS AUDIO-SERVICE GmbH · Alter Postweg 190 · 32584 Löhne · Germany
info@audioservice.com · www.audioservice.com